

WIP'ANIOS Excel



- **Lingettes en viscose 100% biodégradable** (excepté Wip'Anios Excel King Size)
- **Solution d'imprégnation : formulée sans parfum, sans alcool**
- **Large spectre virucide**
- **Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes**



INDICATION

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs*, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

* Exemples: sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...



CARACTERISTIQUES

Solution d'imprégnation : 5 ml de SURFA'SAFE PREMIUM par lingette

	Wip'Anios Excel Travel	Wip'Anios Excel	Wip'Anios Excel King Size
Composition	100% viscose	100% viscose	70% viscose 30% polyester
Taille de la lingette	130 x 210 mm	180 x 200 mm	200 x 360 mm



**LINGETTE A
USAGE UNIQUE**



COMPOSITION

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.



Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection




WIP'ANIOS Excel


MODE D'EMPLOI



Prendre une lingette et bien refermer le devidoir.

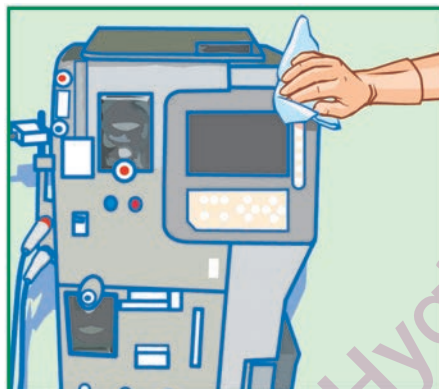

Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Utiliser une seconde lingette si nécessaire. Respecter le temps de contact selon l'activité recherchée.

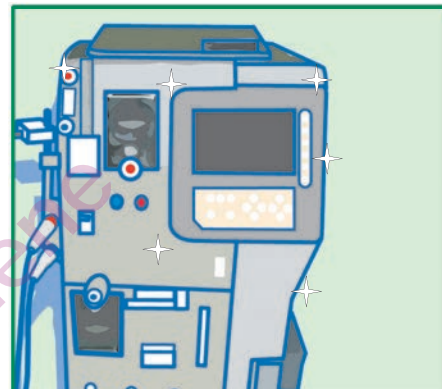

Laisser sécher. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.

Remarque : WIP'ANIOS EXCEL ne remplace pas une étape de nettoyage - désinfection par immersion si celle-ci est possible.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockage : entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (TP2&4) et dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENTS

Wip'Anios Excel Travel

① 24 sachets de 25 lingettes.....Réf. 2617.466

Wip'Anios Excel

② 6 sachets de 100 lingettes.....Réf. 2446.655

③ 12 sachets de 50 lingettes.....Réf. 2446.424

Wip'Anios Excel King Size

④ 1 seau contenant 1 recharge de 350 lingettes.....Réf. 2446.672

⑤ 2 recharges de 350 lingettes.....Réf. 2446.673

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Les lingettes WIP'ANIOS Excel sont bactéricides et levuricides selon EN 16615. La solution d'imprégnation est :

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 13697	2 minutes
	EN 16615	2 minutes
	EN 13727 sur ERV, A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM	1 minute
	EN 13697 sur ERV, A. baumannii βLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM	2 minutes
Levures	EN 1275, EN 13624, EN 13697	5 minutes
	EN 16615	2 minutes
Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	20 minutes
Virus	EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vaccinavirus, HSV, Rotavirus	30 minutes
	Polyomavirus SV 40	1 minute
		5 minutes

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.



Laboratoires **ANIOS** Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
Le professionnel de la désinfection www.anios.com

